


D-Mine Bomb® Guía de Usuario Rápida

Descripción de partes de la terapia de bomba D-mine®

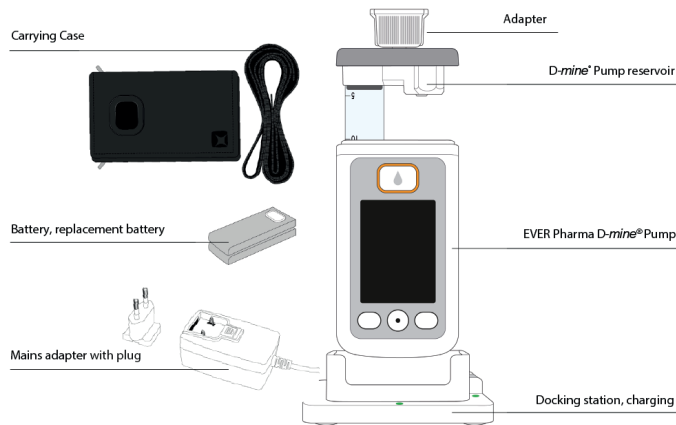

Equipo requerido para la instalación de la bomba de mina d

1. Asegúrese de tener los siguientes artículos:

- bomba de minas d
- estación de acoplamiento de bombas de minas d
- flacón de Dacepton 20 ml
- línea de infusión
- d-reservorio® de bomba de mina
- Solución de desinfección para la piel y la superficie

2. Asegúrese de que tenga una superficie de trabajo limpia


3. Lavar y desinfectar las manos completamente antes de la infusión

4. Cambie la batería todos los días antes de configurar la fusión

 Eliminar las agujas afiladas (como agujas usadas) de acuerdo con los requisitos locales (generalmente un contenedor de agujas o equivalente)

Preparación de la infusión


1. Retire el reservorio De su embalaje.

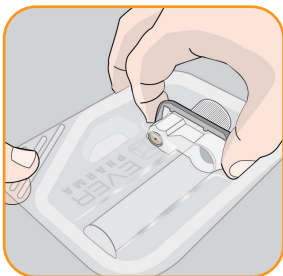


2. Inserte el depósito en la bomba y haga clic firmemente en su lugar.




3. Presione "nuevo reservorio" y confirme que " la autoprueba está completa"

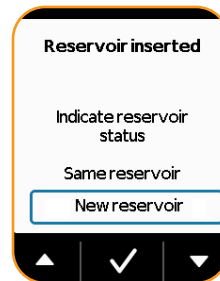

4. Retire la tapa naranja del frasco y colóquela en la estación de acoplamiento.

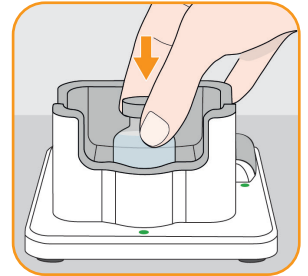

5. Gire la bomba con el depósito y el adaptador apretado y dejar que haga clic verticalmente en el frasco en la estación de acoplamiento.

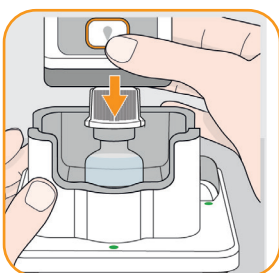


6. Gire la bomba en posición vertical con el frasco y colóquelo en la estación de trabajo. Verifique la ubicación del adaptador girando en sentido horario. Siga las instrucciones en la pantalla para iniciar el proceso de llenado. La bomba debe permanecer en el anillo vertical durante el proceso de llenado.




 Las burbujas ascendentes serán visibles en el frasco.

7. Agarre el frasco con el adapter y retire ambos del embalse girando en sentido antihorario. Elimine estos componentes con los residuos domésticos de acuerdo con la sección 9.5 de sus instrucciones de uso.

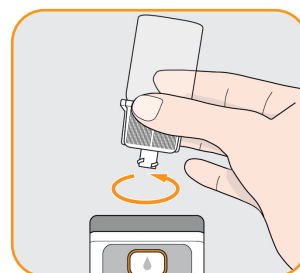


8. Verifique para asegurarse de que la conexión roscada en el depósito sigue siendo limpia. Retire un conjunto de infusión compatible del embalaje y conéctelo al depósito de su bomba. Afirte la conexión roscada de forma segura.

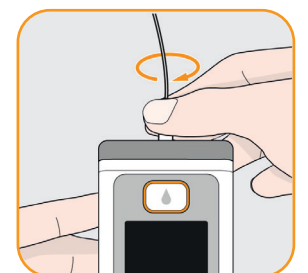

Iniciar la infusión

9. Coloque la bomba en la estación de acoplamiento y confirme 

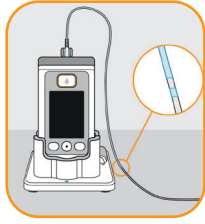


10. La pantalla de la bomba mostrará que la bomba se está preparando-permita una movilización para esto. La bomba debe permanecer erguida durante la preparación.



11. Se mostrará la opción de iniciar la línea de infusión: seleccione "sí" o "No".


 Pregúntale a su especialista para que la línea de infusión se inicie

Puede usar los siguientes sitios de inyección:

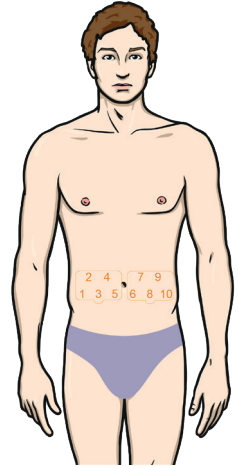


Asegúrese de girar el sitio de inyección para cada uno
Inyección. El masaje ayuda a reducir
Iritación de la piel

12. Coloque la línea de infusión de acuerdo con el consejo de su especialista y confirme el paso en la bomba.

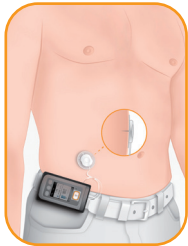

13. Para comenzar la infusión, presione Botón de inicio durante 3 segundos: la velocidad básica y la información de bolus se mostrarán en la pantalla. El símbolo de la hélice giratoria indica que la bomba está funcionando.

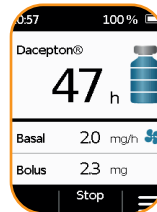

Detener la entrega de drogas


Si el medicamento restante se utiliza al día siguiente, deje el depósito de la bomba intacto y cierra el depósito con un tapón combinado durante la noche. Debe quitar la línea de infusión usada y reemplazarla cuando esté listo para comenzar la infusión de nuevo.

Consulte el paso 8 y conecte una nueva línea de infusión al reservorio de su bomba de minas d. Si el reservorio está vacío, continúe con los siguientes pasos:

1. Presione "detener" en la bomba para detener la infusión




2. Retire la línea de infusión de la piel y la bomba. Eliminar la línea de infusión de manera segura.

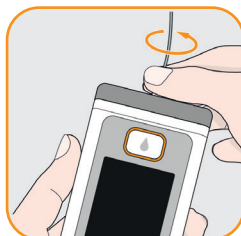

3. Presione firmemente el botón de liberación gris en el lado de la bomba para retirar el depósito usado de la bomba.



4. Descargue el depósito usado en un contenedor de agudo y devolvamos la bomba a la estación de acoplamiento para cargarlo durante la noche.

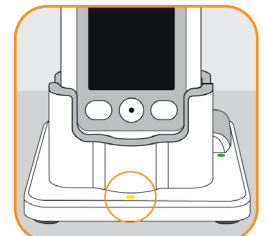

Visítenos en

www.d-minecare.com

D-mine® Care